

《网睿健康体检管理系统》

试用版快速安装运行指南

V2015 年 6 月

一、系统运行环境


服务端：SQL2005 及以上

客户端：.NET Framework4.0


二、快速安装配置指南

1、服务器数据库安装配置指南

1) 运行 SQL 企业管理器，选择附加；

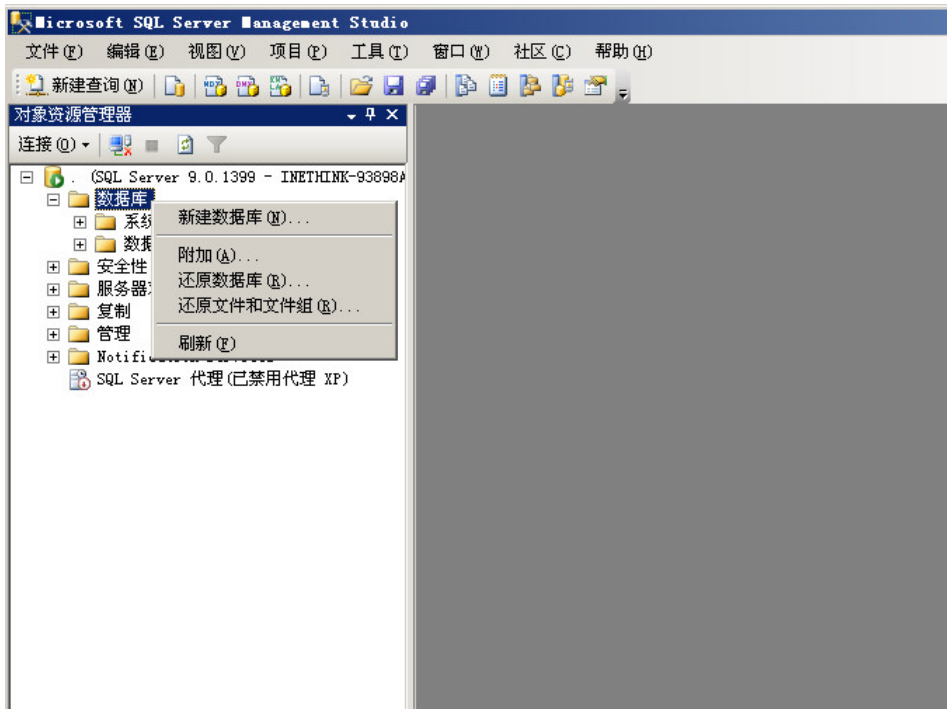

2) 添加 “iNethinkPE_DEMO” 数据库。

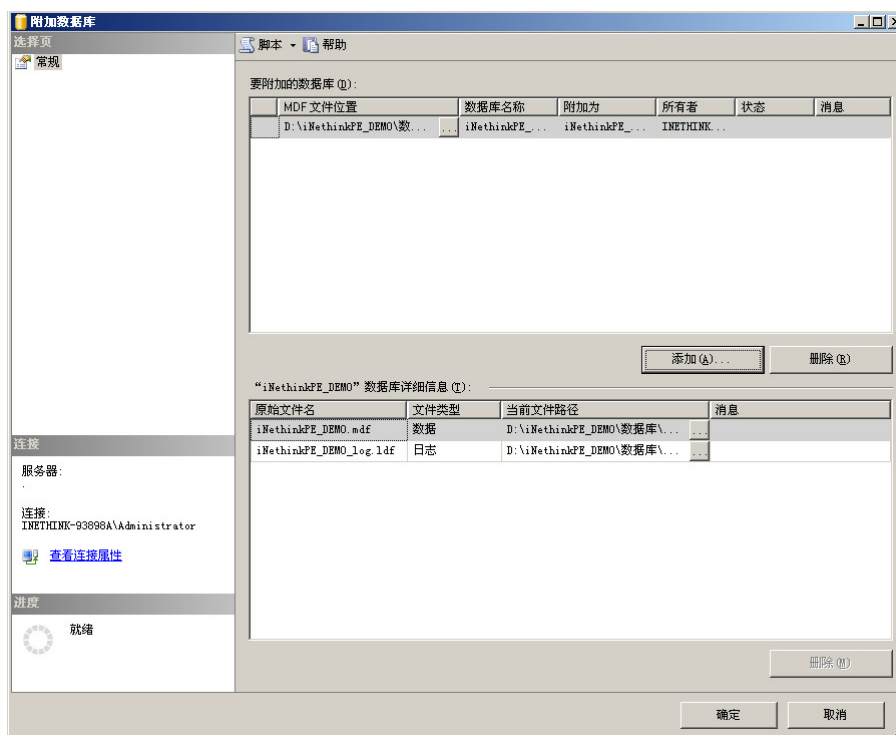

2、客户端安装配置指南

- 1) 将《健康体检管理系统》解压至相应的目录；
- 2) 运行“iNethinkPE.exe”开始试用《健康体检管理系统》。

提示：

- 1、 系统初始用户名：admim 初始登陆密码：111111。
- 2、 启动中系统提示“.NET Framework 初始化错误”，请参见：附件-常见问题中的解决办法。

三、技术支持

您在试用过程中遇到任何问题，可通过电话/传真/邮箱/QQ 与我们联系，我们会在第一时间为您提供帮助！

官方网站：www.i-pe.cn


联系电话：18872201090

联系 QQ：79252127

联系邮箱：service@inethink.com


附件：常见问题

1、系统无法启动，出现“.NET Framework 初始化错误”。

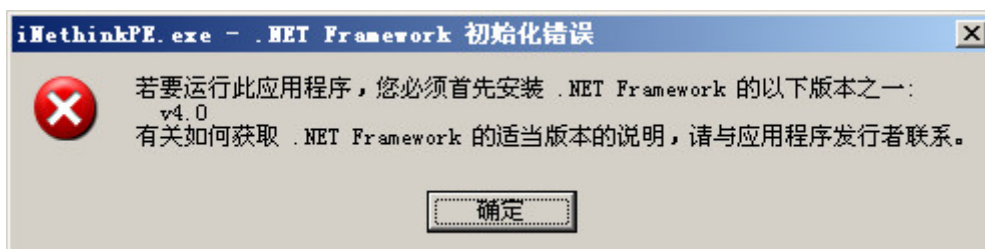


- 1) 请下载.Net4.0，下载地址：<http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718>
- 2) 下载完成后，进行安装；
- 3) 安装完成后，重新运行《健康体检管理系统》即可。

2、系统启动后，提示“数据库连接错误”。

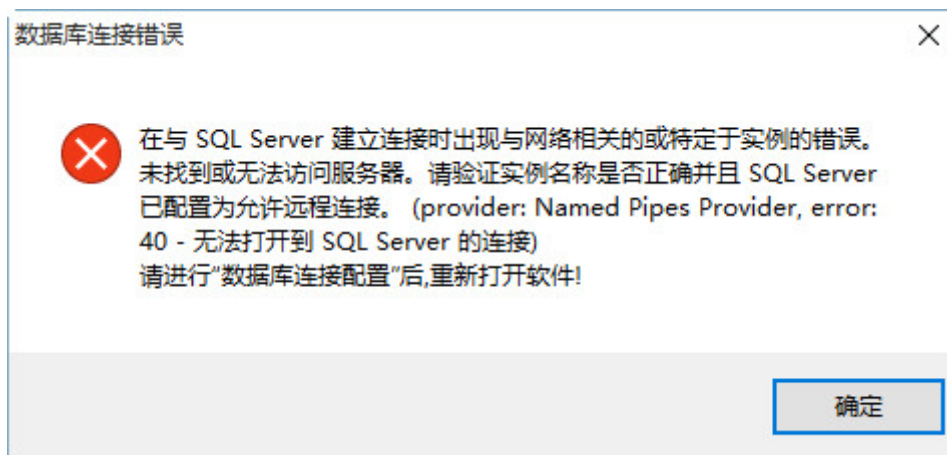

- 1) 点击“确定”，系统会自动运行“数据库连接配置工具”；
- 2) 配置完成后，即可正常运行《健康体检管理系统》。

3、检验设备无法获取检验数据

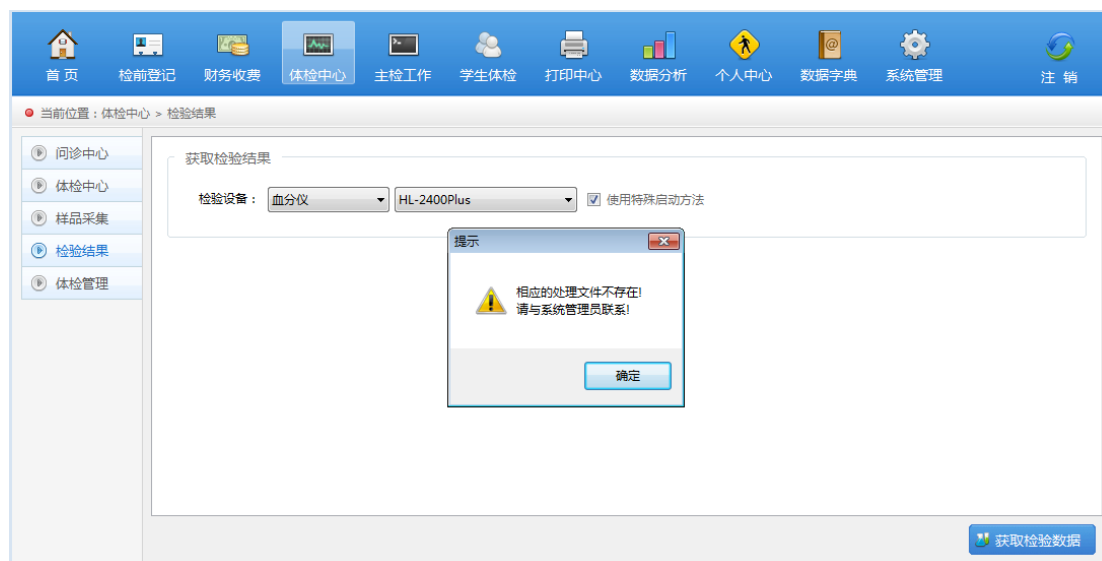

请依据下列步骤进行检查：

- 1) 检查检验设备是否正常运行；
- 2) 检查检验设备通信是否正常；
- 3) 如果依然无法解决此问题，请与我们联系。

4、安装 SQL SERVER 时，提示挂起，需重启计算机

在安装 SQL SERVER 时如果出现提示：“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机。”

请首先按照提示重启计算机，再重新安装。如果仍然出现同样的提示，这是因为安装程序在先前的安装过程中在系统注册表留下了一些信息，导致不能安装。请依据如下步骤解决：

- 1) 在运行窗口输入 regedit，打开注册表编辑器；
- 2) 在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager 中找到 PendingFileRenameOperations，删除该键值；
- 3) 关闭注册表编辑器，重新安装 SQL Server。

相关说明：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 存放的是当前系统会话的快照，而 PendingFileRenameOperations 记录的是一个未成功进行的文件更名操作。SQL Server 在安装时可能会使用这个键值，记录在安装过程中对临时文件的操作，如果 SQL Server 在安装进程启动时就发现这个键值存在，它就认为上一个安装程序没有完成，从而拒绝继续自身的安装进程。而按照道理，任何一个改写过此键值的程序都应当在结束或者系统重新启动的时候将这个键值删除，但如果由于某些原因这个操作没有被进行的话，那么 SQL Server 自然会得出错误的结论。